



جدد شبابك للمعدات الطبية

شباب بلا حدود




كتيب الإستخدام

**جهاز تنقية السموم من الجسم**

**موديل : Detox 3000**

## شرح واجهة الجهاز :

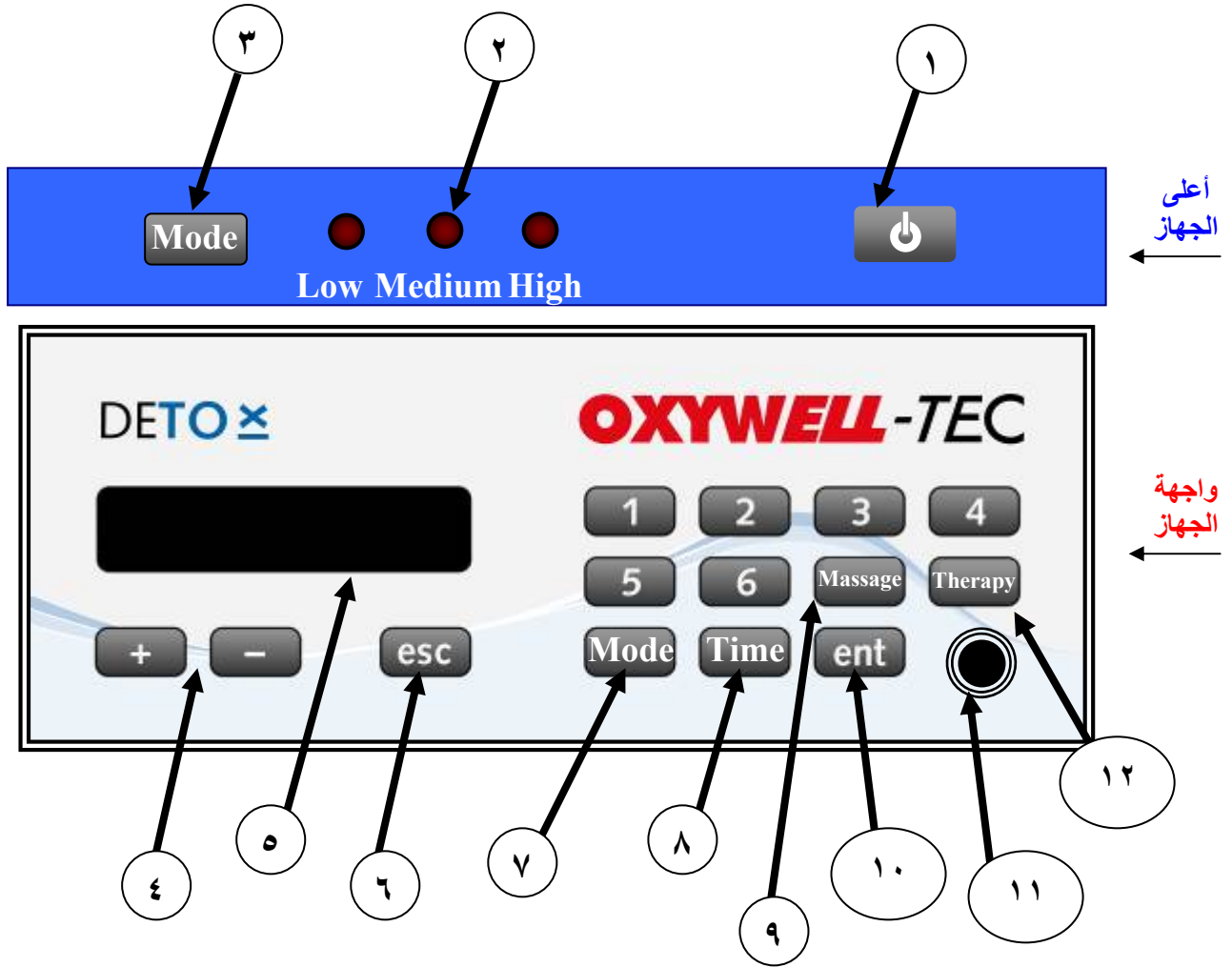

٢- لمبات توضيح شدة الجهاز الموضعي

١- زر بدء التشغيل

٣- زر تشغيل جهاز العلاج الموضعي الاهتزازي الحراري

٤- زر التحكم في الشدة

٦- زر وزن العلاج الموضعي

٥- شاشة التوضيح

٨- زر ضبط الوقت

٧- زر اختيار وضع


١٠- زر التشغيل

٩- زر تشغيل المساج

١٢- زر جلسة العلاج

١١- مقبس المساج الحراري

## شرح الجهاز من الخلف :

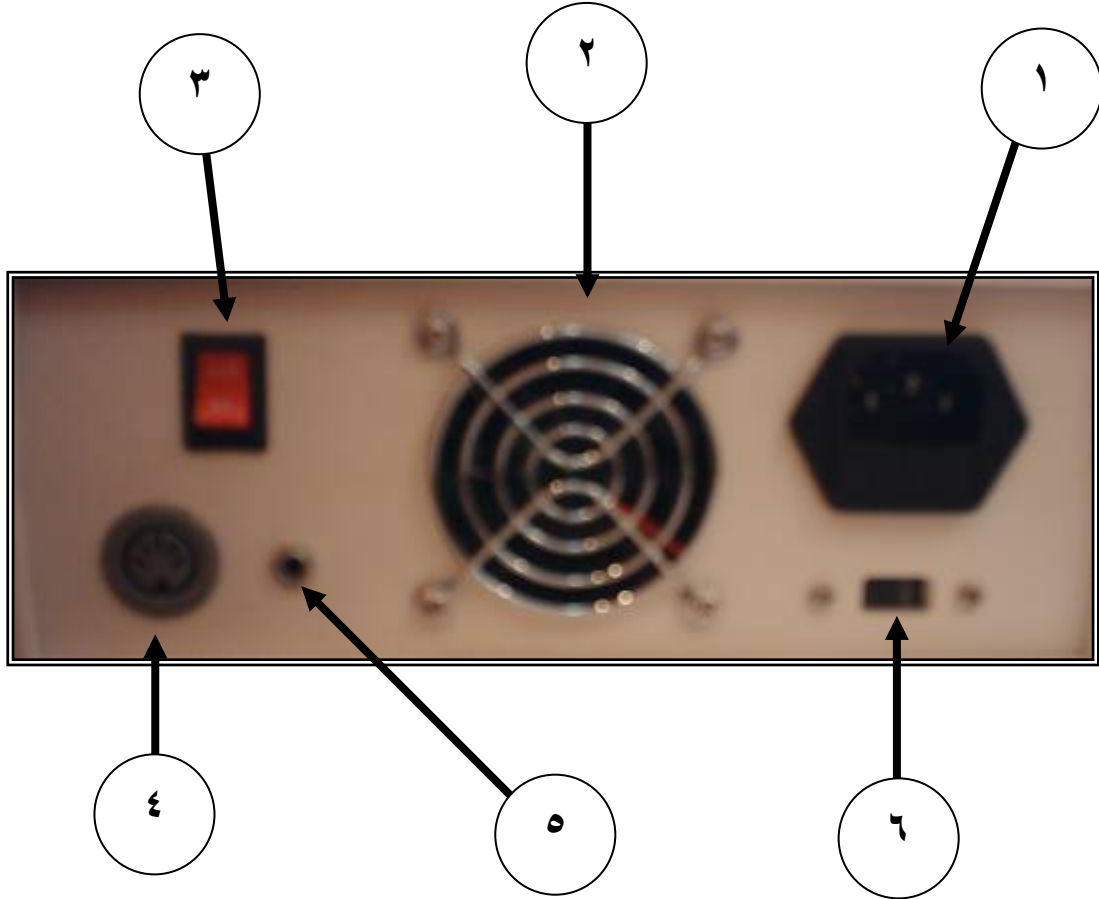

- ١ - مكان توصيل كابل الكهرباء
- ٢ - مروحة تبريد الجهاز
- ٣ - مفتاح توصيل الكهرباء العمومية للجهاز
- ٤ - مقبس الاراي ( لتنقية السموم )
- ٥ - مقبس العلاج الطبيعي
- ٦ - سويتش تحويل الكهرباء من ١١٠ إلى ٢٢٠ فولت والعكس

## تراكم السموم في الجسم:

يتراكم في جسم الإنسان على مر الزمان كميات من السموم التي تترسب بأنسجة الجسم وبصورة رئيسية في الكبد والكلية. وتنتج هذه السموم من تعرض الإنسان لكثير من المواد السامة خلال حياته اليومية من عدة طرق:

- **عن طريق الجهاز التنفسي :** كاستنشاق الأدخنة الناتجة من عوادم السيارات والمصانع والتدخين المباشر أو السلبي، وكذلك استنشاق الغازات السامة. و يتسبب استنشاق تلك المواد في كثير من أمراض الجهاز التنفسي مثل ازدياد نسب أمراض الربو (الحساسية الصدرية) و التليف الرئوي والتحوصل الهوائي للرئتين والالتهابات الرئوية والتهابات الغشاء البللوري المحيط بالرئتين، وكذلك الارتفاع المتزايد يوما بعد يوم للأورام السرطانية للجهاز التنفسي بشكل عام بدءا من البلعوم حتى الرئتين ومرورا بالحجرة.
- **عن طريق الجهاز الهضمي:** تحتوي الخضروات وكذلك أنواع اللحوم المختلفة ومشتقات الألبان والأجبان التي نتناولها على نسبة عالية من السموم الكيماوية والمبيدات الحشرية والمضادات الحيوية. ويتناول هذه الأغذية تنتقل إلينا كل تلك المواد الكيماوية السامة لتترسب في أنسجة الجسم المختلفة. ومن الأمراض التي يسببها تراكم السموم بأي من أعضاء الجهاز الهضمي مرض السكري إذ أن خلايا البنكرياس عند تأثرها بتلك السموم تنخفض طاقتها على إفراز الأنسولين، وكذلك الأورام السرطانية بالجهاز الهضمي: مثل سرطان المعدة والمريء والقولون والكبد.
- **عن طريق الجلد :** وذلك بالتعرض إلى الكثير من المواد التي تلامس الجلد مثل أدوات التجميل النسائية ومبيدات الحشرات و سوائل التنظيف المنزلية، والتي تتسبب ببعض الأمراض الجلدية مثل عدم نضارة البشرة و الحساسية الجلدية والاكزيما والحكة وسرطان الجلد.
- **نتيجة للأمراض الجرثومية:** إذ انه عند تعرض الجسم إلى ميكروب ما فان الجسم يحاربه عن طريق الجهاز المناعي وبخاصة كريات الدم البيضاء ، وبعد تغلب الجسم على ذلك الميكروب يتحلل إلى مواد سمية دقيقة جدا تبقى بالجسم لفترات طويلة.
- **نواتج الأمراض المناعية:** والأمراض المناعية ببساطة هي أمراض تنتج من تعرف الجهاز المناعي بالجسم على احد أعضاء الجسم الأخرى على أنها جسم غريب ( مثل الميكروبات) فيبدأ الجسم في محاربة نفسه وبالتالي تكوين ما يسمى التعقدات المناعية وهي نتاج تفاعل الأجسام المناعية مع الأجسام المضادة للجسم والتي تترسب في احد أعضاء الجسم وتسبب احد الأمراض المناعية مثل ترسبها في المفاصل ( الروماتويد ) وترسبها في الجلد ( الذئبة الحمراء وتكلس الجلد ).
- وبالحديث عن الأمراض لا يفوتنا أن **العلاجات الدوائية الكيماوية** للأمراض في حد ذاتها هي مصدر كبير للسموم في الجسم.

## **الحلول الواقعية المقترحة:**

١- ممارسة الرياضة

٢- الإكثار من استخدام الخضار والبهارات التالية: ( الشمر، النعناع، البقدونس، طرخون، زعتر، كمون، زنجبيل، جوزة الطيب، الثوم)، ( ارضي شوكة، ملفوف، سبانخ، بندورة، هليون، جزر، سلق، فجل، بروكولي، الزهرة، اللفت، الكوسا، الكرفس، السلق، الخبيزة، البصل الاخضر، القمح الكامل، الرز الكامل) حيث تساعد على التخلص من السموم العضوية. وكذلك الأعشاب البحرية، الكمون، البابونج، للتخلص من السموم الكيماوية

٣- استخدام أحد أجهزة التخلص من السموم عن طريق الحوض المائي (Detox 3000)

## فوائد تنقية الجسم من السموم عديدة ومنها:

- زيادة معدلات الطاقة بالجسم (كما ظهرت من خلال صور أخصت بكاميرا حرارية قبل وبعد الجلوسات).
- الإحساس بالصحة والنشاط وارتفاع معدلات الأداء البدني والذهني.
- التقليل من أعراض الأمراض المزمنة بشكل عام، وكذلك التقليل من الأعراض الجانبية للأدوية الكيماوية المستخدمة لعلاج تلك الأمراض.
- تحسين وظائف الكبد والكلية والجهاز الهضمي والليمفاوي في الجسم.
- تحسين في أعراض عسر الطمث في النساء.
- تحسين في أمراض الحساسيات المزمنة كحساسية الجلد والربو.
- ومن الجدير بالذكر انه وبعد فحص المياه مختبريا بعد العلاج وجد بالماء الكثير من السموم بكميات مختلفة وكان أكثرها هي مركبات الفوسفات، النترات و الامونيا.

## آلية العمل:

إن استخدام هذا الحمام المائي والذي يقوم بتأيين الماء وسريان تيار كهربائي بسيط به يشكل دورة كهربائية ما بين الماء بالحوض وبين الماء بالجسم، (مع العلم بان كل قدم تحتوى في باطنها ٢٠٠٠ خلية عرقية (٤٠٠٠ في القدمين) أي الكلية الثالثة) ولهذا السبب فإنها تعتبر بمثابة البوابة إلى الجهاز الدموي والجهاز العصبي وذلك لان الشعيرات الدموية تنتهي بالقرب منها، وعن طريق جذب الشحنات السالبة الموجودة بالحوض للشحنات الموجبة المتواجدة بالسموم فإن الجسم يتخلص تدريجيا من السموم.

وأختم قولي بأن التخلص من السموم المتراكمة هو أحد المسارات الصحيحة التي تقودنا إلى طريق التوازن الصحي وليست الطريق الوحيدة التي يجب أن نسلكها لرفع المستوى الصحي على مستوى الفرد والأسرة

## ( طريقة الاستخدام ) :

- ١- قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء عبر السلك الملحق بالجهاز . ثم قم بتوصيل جهاز الاراي ، وجهاز مساج البطن ، وجهاز العلاج الكهربائي ، ثم قم بوضع القدمين في وعاء به ماء .
  - ٢- أضغط على زر التشغيل (ENT) ، سيبدأ الجهاز في العمل ، ثم سوف تلاحظ أن الماء بدأ في التسخين وفي أثناء ما يتم التسخين أضف القليل من الملح ثم قم بضبط الأمبير ما بين ١,٢ إلى ٣,٢ ( مع مراعاة ضبط كمية الملح التي لا تتجاوز ربع ملعقة شاي صغيرة ) وخلال من ٢٠ إلى ٢٥ دقيقة ستلاحظ إن الماء بدأ يسخن ويتغير لونه وذلك بسبب تفاعل الأملاح مع السموم التي تخرج من بطن القدم .
  - ٣- آلية عمل جهاز العلاج الموضعي الاهتزازي ، ( Massage therapy function ) .
- زر تشغيل جهاز العلاج الموضعي الاهتزازي الحراري في أعلي الجهاز أضغط على (start) ثم قم باختيار درجة القوة والحرارة متوسط ، عالي ، ضعيف .

### - كيف يمكنك استخدام جهاز المساج ؟

عندما تريد استخدام جهاز المساج أضغط على الزر (massage) وللتحكم في قوة المساج استخدم (+ أو -) ثم بعد ذلك أضغط على (esc) . وبعد الانتهاء من ضبط الشدة يمكنك الضغط على زر(start) لبدأ جلسة المساج الموضعي .

٤- العلاج الموضعي يعمل بنفس طريقة عمل المساج أضغط على زر(Therapy) ثم أضغط على زر (Enter).

### - كيف يعمل جهاز العلاج الموضعي ؟

بنفس طريقة المساج أضغط على زر تشغيل جهاز العلاج الموضعي الاهتزازي في أعلي الجهاز أضغط على (start) ثم قم باختيار درجة القوة الاهتزازية متوسط ، عالي ، ضعيف . وأخيرا أضغط على زر (Therapy) لبدأ جلسة العلاج .

### توضيح العملية أكثر

استخدام جهاز العلاج الموضعي ← (start) ← (+ أو -) ← (esc) ← متوسط ، عالي ، ضعيف

← (Therapy) .

استخدام جهاز المساج ← (start) ← (massage) ← (Enter) .

## ملحقات الجهاز :



## تذكر دائماً تحذيرات الإستخدام :

- ١- ممنوع إستخدام الجهاز للأطفال أقل من ٨ سنوات .
- ٢- النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة والدورة الشهرية .
- ٣- في حالة وجود جروح في القدمين .
- ٤- وجود مواد صناعية مزروعة في الجسم .
- ٥- من يعانون من أمراض النزيف .
- ٦- في حالة عملية جراحية لم يمر عليها أكثر من ٦ أشهر .

## لا تنسى مراجعة تحضيرات التشغيل :

- ١- يفضل أولاً إرتداء قفاز بيلاستيكي واقى .
- ٢- وضع الحوض البيلاستيكي على الأرض أو على أى شئى منخفض وثابت .
- ٣- ضرورة فرش عازل بيلاستيكي بأرضية الحوض ( للوقاية من إنتقال الأمراض من مستخدم إلى آخر ) .
- ٤- ملئ الحوض بالماء حتى الحد الذى يسمح بغمر الأرجل بالمياه .
- ٥- إضافة الملح للماء بالمقدار المناسب للحوض .
- ٦- وضع الأراي فى منتصف قاع الحوض ثم يوصل بمكانه خلف الجهاز .
- ٧- إستكمال باقى البرامج العلاجية كما سبق التوضيح .

للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني [www.europarabia.com](http://www.europarabia.com)

الشركة الأوروبية العربية للمعدات الطبية  
شباب بلا حدود الإرتكاز الذهبى جدد شبابك